



HomeFree®

Gibt Bewegungsfreiheit und Sicherheit

Leistungsmerkmale auf einen Blick:

- Kabelloses Überwachungssystem (jederzeit erweiter- und änderbar)
- Überwachung beliebiger Bereiche, Türen und Freigelände
- Persönliche Uhren für gefährdete Patienten
- Funk-Notruftasten, um jederzeit Hilfe anzufordern
- Überwachungs-PC im Dienstzimmer
- Pager zur Überwachung vor Ort
- Suchmodus zeigt die Annäherung / Entfernung der gesuchten Person an
- Schnittstellen zu Lichtrufsystemen, mobilen Fernsprechanlagen (DECT) und Pagern
- Mobile Überwachungsgeräte für unterwegs

Das Desorientiertenfürsorgesystem HomeFree®

Krankheitssymptome, wie Orientierungs- und Erkennungsstörungen, Sturzrisiko und Weglauftendenzen, erschweren die Betreuung von Demenzpatienten in Altenwohn- und Pflegeheimen. Das Desorientiertenfürsorgesystem HomeFree® erhält die Lebensqualität der Patienten und verschafft ihnen einen sicheren Aktionsradius.

Aufenthaltsbereiche innerhalb von Gebäuden, Durchgangs- und Außentüren sowie Freiflächen (Terrassen, Garten usw.) werden mit drahtlosen Überwachungsgeräten ausgestattet. Sie kommunizieren per Funk untereinander und mit einer Zentraleinheit (z.B. im Dienstzimmer). Da keine Baumaßnahmen anfallen, lässt sich HomeFree® in vorhandenen Einrichtungen kostengünstig nachinstallieren und jederzeit an veränderte Anforderungen anpassen.

Sicherheit per Funk

Jeder desorientierte Patient erhält eine spezielle wasserfeste Armbanduhr mit digitalem oder analogem Ziffernblatt. Diese persönliche Uhr hält ständigen Funkkontakt zu den Überwachungsgeräten im aktuellen Aufenthaltsbereich des Patienten.

Zusätzliche Sicherheit verleihen am Arm oder als Halskette getragene Funk-Notrufsender, mit denen nicht nur Patienten, sondern auch gefährdete Pflegekräfte jederzeit Hilfe herbeirufen können.

tyco

Fire & Integrated Solutions

Komfortable Aufbereitung der Informationen

Alle Meldungen und Alarme werden auf dem Monitor eines im Dienstzimmer befindlichen PC angezeigt. Stilisierte Grundrisse der Überwachungsbereiche und Tabellen schaffen Übersichtlichkeit. Die Software ist leicht zu konfigurieren und zu bedienen. Das Pflegepersonal erhält detaillierte Informationen, wenn sich eine desorientierte Person z.B. einer Durchgangs- oder Außentür nähert (automatische Türsperrung möglich), einen Aufenthaltsbereich betritt oder verlässt oder ihre persönliche Uhr ablegt. Die Pflegekräfte tragen mobile Empfangsgeräte und können auf diese Weise jederzeit Meldungen und Alarme empfangen – auch wenn sie im Gebäude unterwegs sind. Akustische Signale verweisen auf Meldungen, die auf einem großen Display in Klartext angezeigt werden. Ein Suchmodus hilft beim Auffinden von Patienten im gemeldeten Bereich. Eine Balken-Anzeige und ein sich veränderndes akustisches Signal macht deutlich, ob sich der Patient entfernt oder nähert.


Schnittstellen zu weiteren Kommunikationssystemen

Ist Ihr Haus mit einer Lichtrufanlage ZETTLER® Medical® 800 ausgerüstet, können die HomeFree® Meldungen und Alarme auch an dieses System weitergeleitet werden.

Die Pflegekräfte erhalten – angepasst an die Pflegeschichten – die Informationen gemeinsam mit den Lichtrufmeldungen an allen stationären und mobilen Abfragestellen. Die Weiterleitung der Meldungen und Alarme auf mobile Telefonanlagen (DECT) und Pager ist ebenfalls möglich. Das Pflegepersonal wird mobiler und flexibler; es kann schnell auf Notsituationen reagieren; die Sicherheit desorientierter Patienten wird erhöht.

Auch unterwegs sicher

Bei Ausflügen, Veranstaltungen und in Therapiegruppen muss nicht auf Bewegungsfreiheit und Sicherheit durch HomeFree® verzichtet werden. Ein am Gürtel der Aufsichtsperson tragbares Überwachungsgerät hält ständigen Funkkontakt mit den „persönlichen Uhren“ der in der Gruppe befindlichen desorientierten Personen. Verlässt ein gefährdeter Patient den vorgegebenen Bereich, erhält die Aufsichtsperson einen Alarm mit Kennung des Patienten. Suchmaßnahmen können sofort eingeleitet werden.

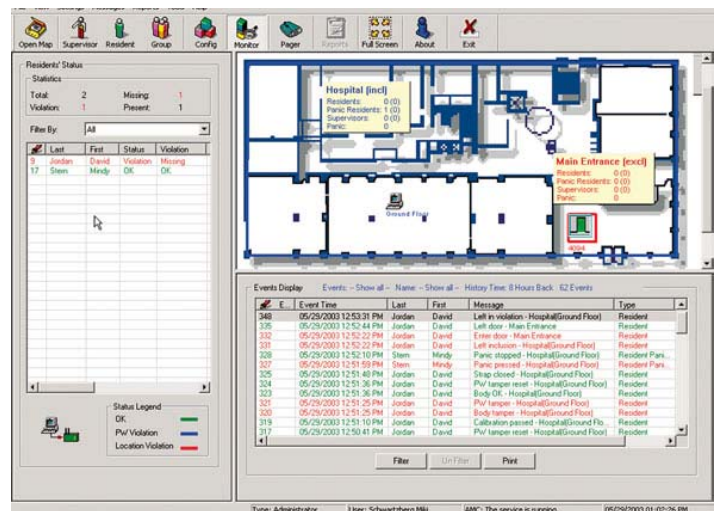

Der Monitor des Dienstzimmer-PC stellt Meldungen und Alarme sowie die aktuellen Aufenthaltsorte aller gefährdeten Personen

Für weitere Informationen über die Produkte und Leistungen von Tyco wenden Sie sich bitte an eine unserer Vertriebsniederlassungen oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.tycofireandsecurity.com.

Tyco behält sich das Recht vor, angebotene Produkte oder Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zurückzuziehen.

Firmenstempel:

